


 MatsuHaku 玛芝哈克 **磁性材料体积密度测试仪** GH-120I/GH-300I

适用于：锰锌铁氧体、镍锌铁氧体、钕铁硼和钕钴、
稀土磁性材料、遇水瓦解材料、新材料研究实
验室

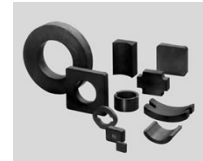

原理：根据 ASTM B311、MPIF Standard 42、JIS Z2505、
GB/T5163 规范。可适用于封蜡法、煮沸法、真空饱和法量测，依据阿基米得浮力
法的原理，快速读取量测数值。

GH-120I 称重精度：0.001g



功能：

- A、吸水性的生胚或烧结后磁性材料，应用媒介法可直接读取体
密度、湿密度、视密度、视孔隙率、吸水率、开孔体积、封孔
体积、总孔隙率。
- B、封蜡法可直接读取体比重。
- C、可利用硅油当媒介直接读取产品密度和体积。

GH-300I/600I 称重精度：0.01g



功能：

- A、吸水性的生胚或烧结后磁性材料，应用媒介法可直接读取体
比重、视密度、视孔隙度、吸水率。
- B、封蜡法可直接读取体比重。
- C、可利用硅油当媒介直接读取产品密度。

- 1、采用大水槽设计，降低吊栏线的浮力所造成的误差。
- 2、采用腐蚀性液体做为媒介时，可选购防腐蚀水槽。
- 3、RS-232 可轻易的连接 PC 和打印机。

规格：

型号：	GH-120I	GH - 300I	GH - 600I
称重范围：	0.001g [~] 120g	0.01g [~] 300g	0.01g [~] 600g
比重精度：	0.0001 g/cm ³	0.001 g/cm ³	
测量时间：	约 10 秒		
设定：	温度补偿设定、溶液补偿设定、封蜡法蜡密度设定		
标准接口：	RS-232		

选购配件：

A: 防腐蚀水槽



D: 硅油

B: 打印机



E: 真空抽取机

C: 电磁加热设备



F: 自动控温蜡炉

0592-5231714 15985818270
厦门群隆仪器有限公司-比重计专

家

www.bizhongji.net 联系人：林汉卿



0592-5231714 15985818270
厦门群隆仪器有限公司-比重计专
家
www.bizhongji.net 联系人：林汉卿